



microlife®



- 100% Водонепроникний
- Антиалергенний накінецьник
- Гнучкий накінецьник

## Термометр медичний електронний МТ 1931

БЕЗКОШТОВНА ГАРЯЧА ЛІНІЯ  
0 800 507 567  
з 9.00 до 18.00 по буднях  
з мобільних та стаціонарних телефонів по Україні

2 роки  
Гарантія!!!

BB MT 1931 GT V3-UA 1520

## Термометр медичний електронний МТ 1931

DESCRIPTION OF THIS PRODUCT  
Описание продукта  
Опис продукту



Measuring sensor / Gold Tip  
Измерительный датчик / наконечник с золотым покрытием  
Вимірювальний сенсор / наконечник з золотим покриттям

Display field  
Дисплей  
Дисплей

ON/OFF button  
Кнопка Вкл/Выкл  
Кнопка УВІМК/ВІМКН

Battery compartment cover  
Крышка отделения для батарей  
Кришка батарейного відсіку



Allergic<sup>1</sup>  
Антиаллергенный<sup>1</sup>  
Гіпоалергенний<sup>1</sup>



Flexible tip  
Гнучкий наконечник  
Гнучкий наконечник



100% waterproof  
100%-ная водонепроницаемость  
100% водонепроникність



Signal Tone  
Звуковой сигнал  
Звуковий сигнал



Memory  
Память  
Пам'ять

<sup>1</sup> no nickel in direct contact with the skin / <sup>1</sup> нет прямого контакта никеля с кожей / <sup>1</sup> немає прямого контакту нікеля зі шкірою

### MEASURING METHODS / Способы измерения / Способи вимірювання

Method / Способ	Time / Времія	Normal / Норма / Норма
Oral орально орально	60 seconds 60 секунд 60 секунд	35.5 °C – 37.5 °C
Rectal ректально ректально	60 seconds 60 секунд 60 секунд	36.6 °C – 38 °C
Axillar аксиллярно аксиллярно	5 - 10 minutes * 5 - 10 минут * 5 - 10 хвилин*	34.7 °C – 37.3 °C

\* 5 minutes after beep tone (depending on ambient temperature)  
\* 5 минут после звукового сигнала (в зависимости от температуры окружающей среды)  
\* 5 хвилин після звукового сигналу (в залежності від температури навколишнього середовища)

### CLEANING AND DISINFECTING / Очистка и дезинфекция / Очищення і дезінфекція

Name / Средства / Засоби	Immerse / Погружение / Занурення
Ethyl alcohol 70%	Max. 30 minutes
Спирт этиловый для наружного применения	Макс. погружение на 30 минут
Спирт этиловый для внешнего застосування	Макс. занурення на 30 хвилин

### BATTERY REPLACEMENT / ЗАМЕНА БАТАРЕИ / ЗАМІНА БАТАРЕЇ

When the «▼»-symbol appears, the battery is exhausted and needs replacing. Please remove the compartment lid of the thermometer and replace the exhausted battery by positioning the + at the top.


Появление в правом нижнем углу дисплея символа «▼» означает, что батарея исчерпала свой ресурс и нуждается в замене. Замените использованную батарею, установив новую знаком + вверх.

Поява на дисплеї символу «▼» (перевернутий трикутник) означає, що батарея розряджена і потребує заміни. Для заміни батареї зніміть кришку батарейного відсіку з термометра. Вставте нову батарею полюсом «+» догори.



microlife®

Термометр медичний електронний МТ 1931  
Термометр медичний електронний МТ 1931  
Гарантія не розповсюджується на батарею

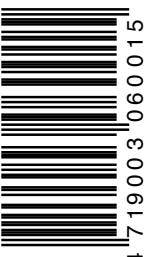

4 719003 060015

CLINICALLY TESTED